

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 71 / 04
Sicherheitstest VitaGuard	Seite 1 / 3

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, den Sicherheitstest nach IEC60601-1 fachgerecht durchzuführen.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Maßnahmen und Vorgehensweisen

3.1 Geräteanschluss

Anschluss des Netzgerätes an die Buchse „Prüfobjekt“, der 3 EKG-Leitungen an die Buchsen „1“, „2“ und „3“ sowie Buchse „Prüfspitze“ über ein umgebautes USB Kabel (Eine Seite mini B USB, die andere Seite Bananenstecker – gestellt von getemed).



Anschluss der VitaGuard-Geräte

Verteiler: Server: F, FP

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Kaehler	Q	23.04.2024	
Genehmigt :	Henschel	G	23.04.2024	

Arbeitsanweisung**AA - Nr.
71 / 04****Sicherheitstest VitaGuard**

Seite 2 / 3

Abbild VG310**Abbild VG2100 / 3100****3.2 Prüfungsablauf**

Es wird eine Erstprüfung durchgeführt bei den ersten beiden Geräten des Loses.

3.2.1 Vorbereitung

1. Prüfgerät und Prüf-PC starten.

Prüf-PC Verzeichnis öffnen:

[\\FS\Fertigung\Fertigungsunterlagen\\GeTeMed\\VG3100ff\\Gerät komplett \(g-000254, -255, -256\)\\Prüfprotokolle Lieferungen](\\FS\Fertigung\Fertigungsunterlagen\\GeTeMed\\VG3100ff\\Gerät komplett (g-000254, -255, -256)\\Prüfprotokolle Lieferungen)

Gemäß Messplatz Excel-Prüfprotokoll auswählen und es öffnen:

Syntax: z.B. für Messprüfplatz 5

_VitaGuard Sicherheitstest 60601_SKII_3.Ed.2(MP5).xlsm

3.2.2 Prüfungsdurchlauf

1. VitaGuard (mit eingesetzten Batterien) einschalten und gemäß dem oberen Abbild je nach Modell (siehe Abbild VG310 oder Abbild VG2100 / 3100) verbinden.
2. Im oben genannten Prüfprotokoll in das Feld für „Nummer des Prüfobjekts“ klicken und die Seriennummer von der Rückseite des zu prüfenden Gerätes einscannen.
3. Im Prüfprotokoll auf „Prüfung starten“ klicken. Das Prüfgerät wird automatisch erkannt. Nach der Erkennung ist auf „OK“ zu klicken.
4. In der sich nun öffnenden Dialogbox des Prüfprotokolls auf „Start [F9]“ klicken. Die Prüfungsschritte des Protokolls werden nacheinander ausgeführt.
5. Nach Abschluss der Prüfschritte auf „OK [F12]“ klicken. Dies gilt auch für die anschließend angezeigte Dialogbox. Diese ist ebenfalls durch Klicken auf „OK“. Zu schließen.

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
71 / 04**

Sicherheitstest VitaGuard

Seite 3 / 3


6. Nach Abschluss der Prüfung wählt man in der Menüleiste „Datei“ die Option „Exportieren“ aus. Das Prüfprotokoll wird als PDF-Datei exportiert. Um einen angemessenen Dateinamen zu vergeben, klickt man in das Feld Dateiname und überschreibt den Standardnamen zuvor wie folgt.
7. Der neue Dateiname umfasst die Seriennummer und das aktuelle Datum. Man scannt hierfür zunächst die Seriennummer von der Rückseite des Prüfgerätes und dann den QR-Code für das aktuelle Datum, um die Informationen zu erfassen.
8. Im letzten Schritt klickt man zur Ablage des Prüfprotokolls auf „Veröffentlichen“.

FEHLERFALL:

Im Fehlerfall endet die Prüfung beim fehlerhaften Prüfpunkt und es findet kein kompletter Prüfablauf mehr statt. Ein Popup-Fenster mit einer Warnung zur Achtung wird angezeigt, siehe Abbild Fehlermeldung.

Zuerst ist zu überprüfen, ob die Funktion des Sicherheitsprüfgerätes und die Verbindung zum Prüfgerät einwandfrei ist, um sicherzustellen, dass diese nicht die Ursache des Fehlers sind. Im Fehlerfall wird das geprüfte Gerät mit der Fehlermeldung, beispielsweise „Fehler im Schritt1: 246,8 μ A“, als Defekt mit dem Defekt-Aufkleber gekennzeichnet für das Sperrlager.

Abbild Fehlermeldung

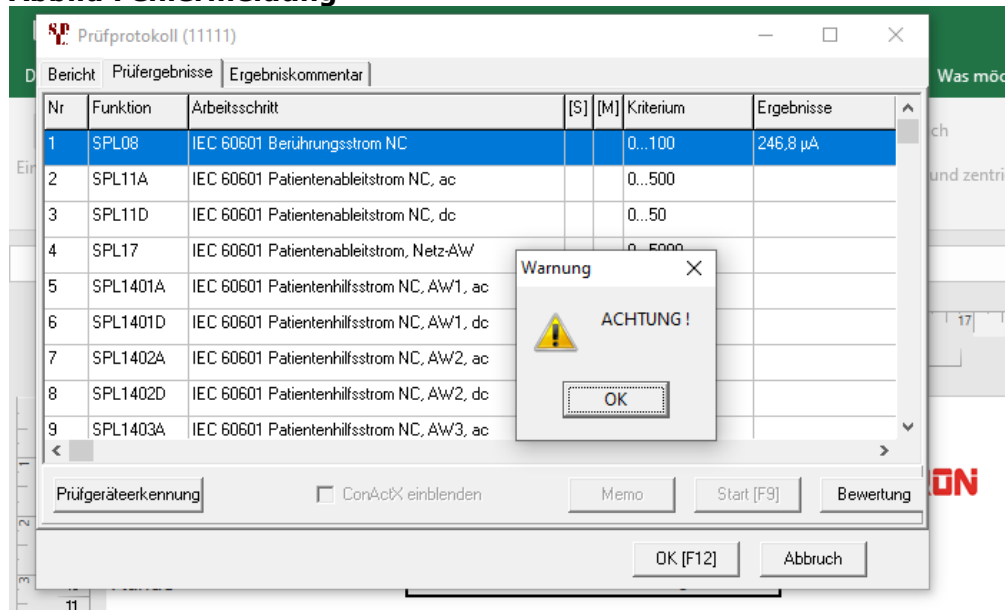

4 Mitgeltende Dokumente

- **aktuelle getemed Prüfanweisung** – Zwischen- und Endprüfung VitaGuard VG310/2100/3100
- **PB-Nr. 34** Fehlerhafte Produkte

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
03	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
04	Kaehler	Q	23.04.24	Überarbeitung	3.2 Prüfungsablauf: Neufassung der nachfolgenden Abschnitte.